



# Fotoringiovanimento Pigmentario con **Minisilk FT**

**Dott. Antonio Pulvirenti**

Aging Medicalaser Srl - Giarre (Ct) - Italia

### Iperpigmentazione del volto (F.T. III-IV)

3 sessioni distanziate di 21 gg

#### Prima Sessione

Primo passaggio: Filtro 550 nm - 2 impulsi - Pulse 4 ms - Delay 20 ms - Fluenza 10-12 J/cm<sup>2</sup>

Secondo Passaggio solo sulle macchie: Filtro 550 nm - 1 impulso - Pulse 6 ms - Fluenza 8 J/cm<sup>2</sup>

#### Seconda Sessione

Solo 1 passaggio: Filtro 550 nm - 2 impulsi - Pulse 3 ms - Delay 20 ms - Fluenza 12 J/cm<sup>2</sup>

#### Terza Sessione

Primo Passaggio: Filtro 550 nm - 2 impulsi - Pulse 3 ms - Delay 20 ms - Fluenza 10-12 J/cm<sup>2</sup>

Secondo Passaggio: Filtro 650 nm - 2 impulsi - Pulse 3 ms - Delay 20 ms - Fluenza 10-12 J/cm<sup>2</sup>



Pre Trattamento



Follow up a 1 settimana  
dalla 3<sup>a</sup> seduta



Pre Trattamento



Follow up a 1 settimana  
dalla 3<sup>a</sup> seduta



### Iperpigmentazione dorso mano

3 sessioni con doppio passaggio distanziate di 21 gg

#### Per ogni Sessione

Primo Passaggio: Filtro 550 nm - 2 impulsi - Pulse 3 ms - Delay 20 ms - Fluenza 12-13 J/cm<sup>2</sup>

Secondo Passaggio: Filtro 650 nm -2 impulsi - Pulse 3 ms - Delay 20 ms - Fluenza 12-13 J/cm<sup>2</sup>

### Iperpigmentazione del volto (F.T. II)

2 sessioni con doppio passaggio distanziate di 18 gg

#### Per ogni Sessione

Primo Passaggio: Filtro 550 nm - 2 impulsi - Pulse 3 ms - Delay 20 ms - Fluenza 12-13 J/cm<sup>2</sup>

Secondo Passaggio: Filtro 550 nm -2 impulsi - Pulse 6 ms - Delay 20 ms - Fluenza 10-11 J/cm<sup>2</sup>



Pre Trattamento




Follow up a 1 settimana dalla 3<sup>a</sup> seduta



Pre Trattamento



Follow up a 1 settimana dalla 3<sup>a</sup> seduta

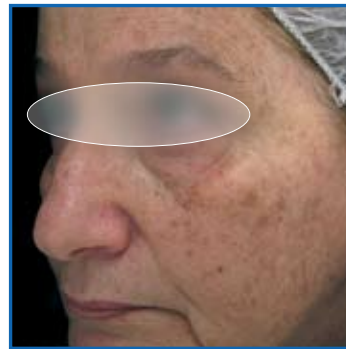


Pre Trattamento



Follow up a 1 settimana dalla 2<sup>a</sup> seduta



Pre Trattamento

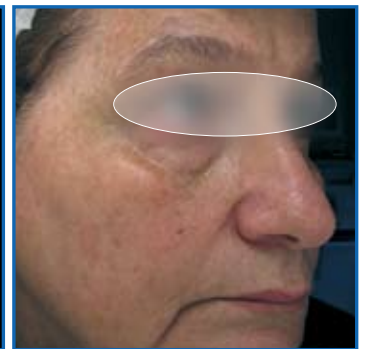

Follow up a 1 settimana dalla 2<sup>a</sup> seduta